

配信アプリケーションを利用した
クライアントアプリケーションの
手動更新手順書

第 1.00 版

2022 年 3 月 31 日

変更履歴

項番	版数	変更理由	変更内容	変更箇所	変更区分 (追加/変更/削除)	年月日
1	1.00	初版作成	-	-	-	2022/3/31

目次

1. はじめに.....	1
1.1 本書の目的.....	1
1.2 本書の構成.....	1
1.3 前提条件.....	2
2. 配信アプリケーションを利用したクライアントアプリケーションの手動更新手順.....	3
2.1 クライアントアプリケーションのダウンロード・アップデート.....	3
2.2 アップデートの確認.....	8
3. 動作確認.....	11
4. 初期セットアップにおいて、手動更新したが動作確認でエラーになった場合.....	12

1. はじめに

1.1 本書の目的

本書は、クライアントアプリケーション（配信アプリ、連携アプリ、顔認証ライブラリ）や顔認証ベンダー提供の顔認証付きカードリーダーアプリケーションの配信されたバージョンへの更新を、任意のタイミングで行う手順を示す。

1.2 本書の構成

本書の構成を「表 1-1 本書の構成」に示す。

表 1-1 本書の構成

項番	資料名	概要
1	配信アプリケーションを利用したクライアントアプリケーションの手動更新手順書（本書）	配信アプリケーションの「今すぐダウンロード」機能を利用した、各アプリケーションのバージョンアップ手順を記載した資料

1.3 前提条件


- 資格確認端末の管理者権限を持つ「OqsComApp」ユーザーで操作すること
- 配信アプリケーション(1.0.8 版以上)を導入済みであること
- 配信サーバーへの接続が可能であること
※配信サーバーへの接続方法は「医療機関等向けセットアップ手順書（資格確認端末編）」をご参照ください
- 配信アプリケーションによる自動更新を行っていること
※自動更新を行っていない場合、環境構築したベンダー等にご相談いただき、各クライアントアプリケーションの再インストールを行っていただくようお願いいたします

※配信アプリケーションによる自動更新を無効としている場合、本手順は対象外です。

2. 配信アプリケーションを利用したクライアントアプリケーションの手動更新手順

2.1 クライアントアプリケーションのダウンロード・アップデート



- ① OqsComApp ユーザーで Windows にログインします。
- ② デスクトップのショートカットから、配信アプリケーション管理ツールを起動します。

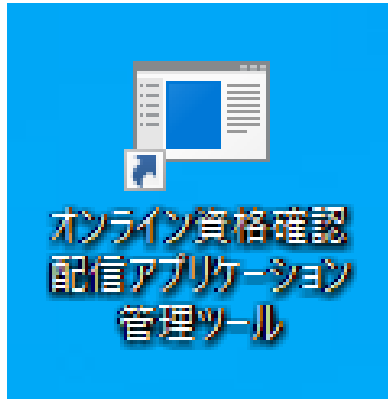


「はい」を選択します。




- ③ [配信実績の確認]をクリックして、配信実績より、"Version" の項目から現在インストールしているバージョンを確認します。
自動更新等で既に各クライアントアプリケーションのバージョンが最新バージョンになっている場合、[今すぐダウンロード]をクリックしても処理はスキップされます。
最新バージョンになっている場合は、以降の手順は不要です。
※顔認証ベンダー提供の顔認証付きカードリーダーアプリケーションにつきましては、各社のバージョンをご確認ください。

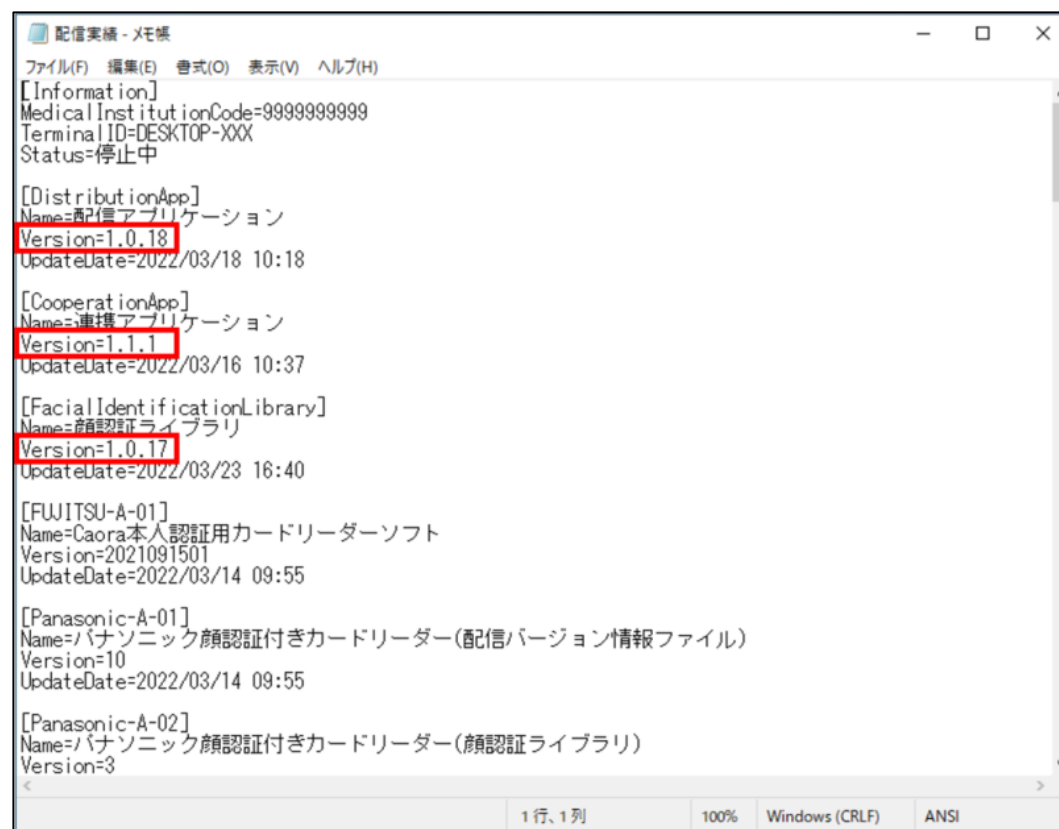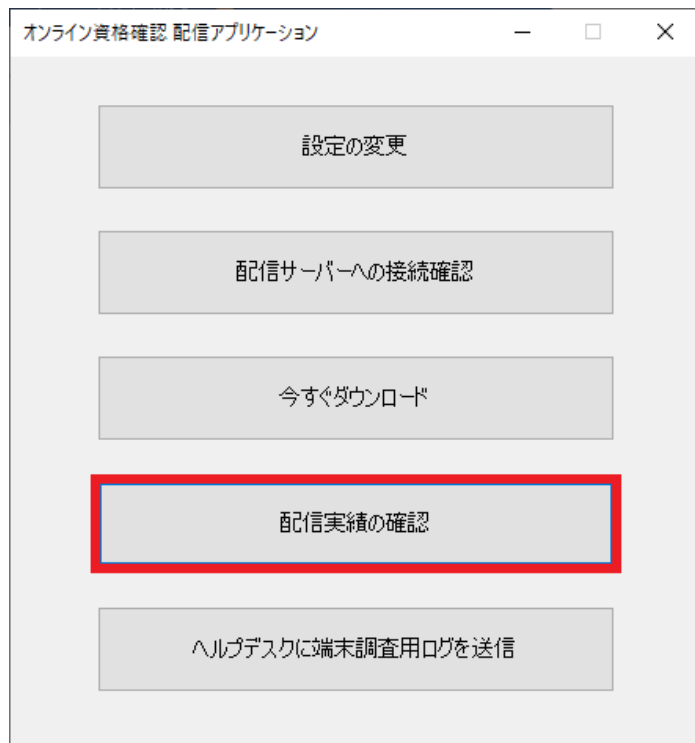

④ [今すぐダウンロード]をクリックして、更新資材をダウンロードします。

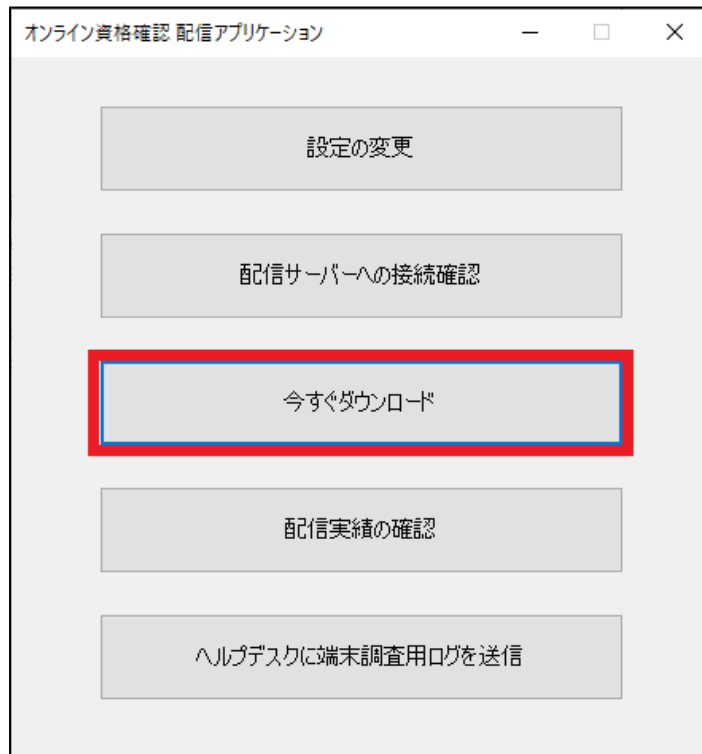


⑤ [ダウンロード依頼の受付]のダイアログが表示されるので、[OK]をクリックします。

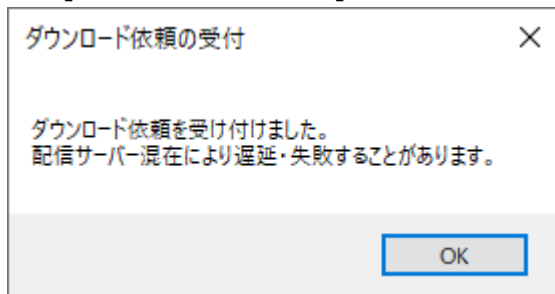


⑥ 更新準備が完了するとダイアログが表示されます（※1※2）。表示されたダイアログを確認し、[確認しました]をクリックします。

例)


1. 顔認証ライブラリが更新対象の場合

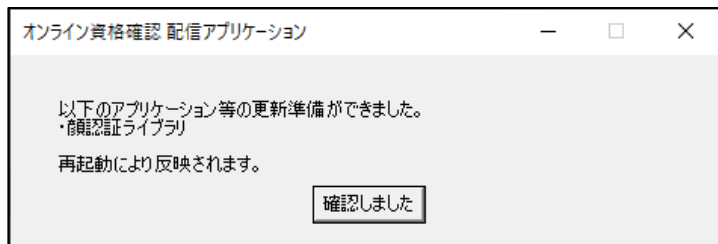

2. 連携アプリケーションが更新対象の場合

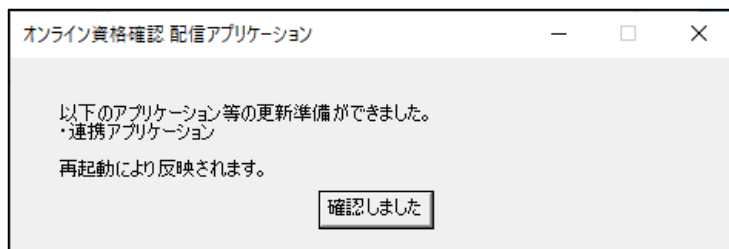

3. 顔認証ベンダーアプリケーションが更新対象の場合

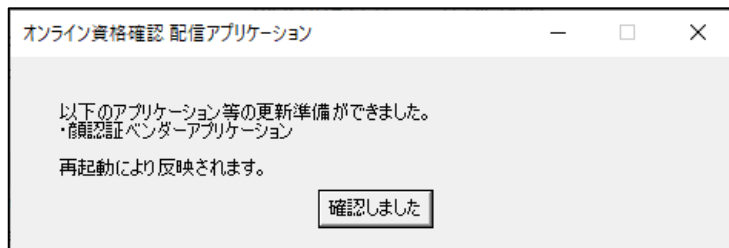


※1 更新対象が配信アプリケーションの場合、ダイアログは表示しません。

※2 1回のダウンロードおよびインストールに20分程度要します。

(ダウンロード・インストール時間は20分程度を想定しておりますが、アップデート容量と各医療機関等のネットワーク帯域に応じて、ダウンロード・インストール時間は異なります。)


⑦ 資格確認端末を再起動します。

更新資材のダウンロードには優先順序があります。各アプリケーションが最新化されるまで、①～⑦の手順を繰り返す必要があります。
資格確認端末を再起動せずに「今すぐダウンロード」ボタンを押下した場合は、次の更新対象のアプリケーションのダウンロードを行います。

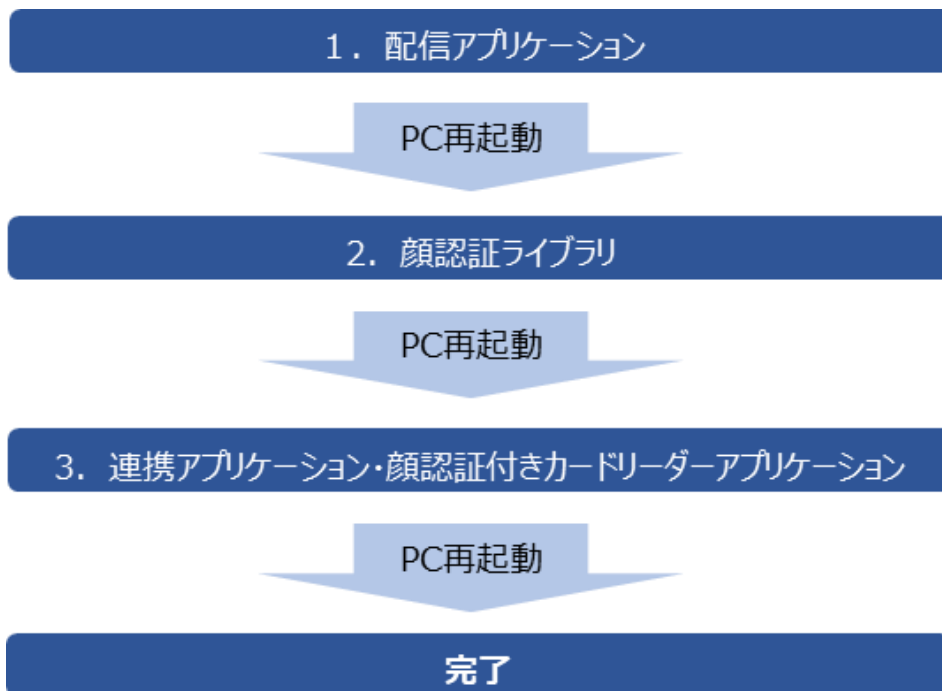

2.2 アップデートの確認


- ① OqsComApp ユーザーで Windows にログインします。
- ② デスクトップのショートカットから、配信アプリケーション管理ツールを起動します。

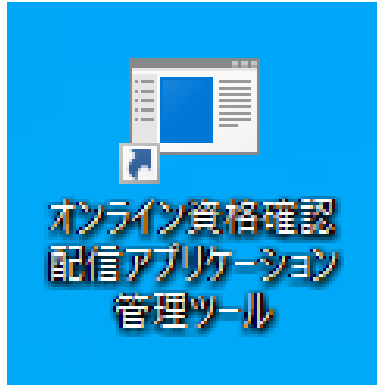


「はい」を選択します。



③ [配信実績の確認]をクリックします。

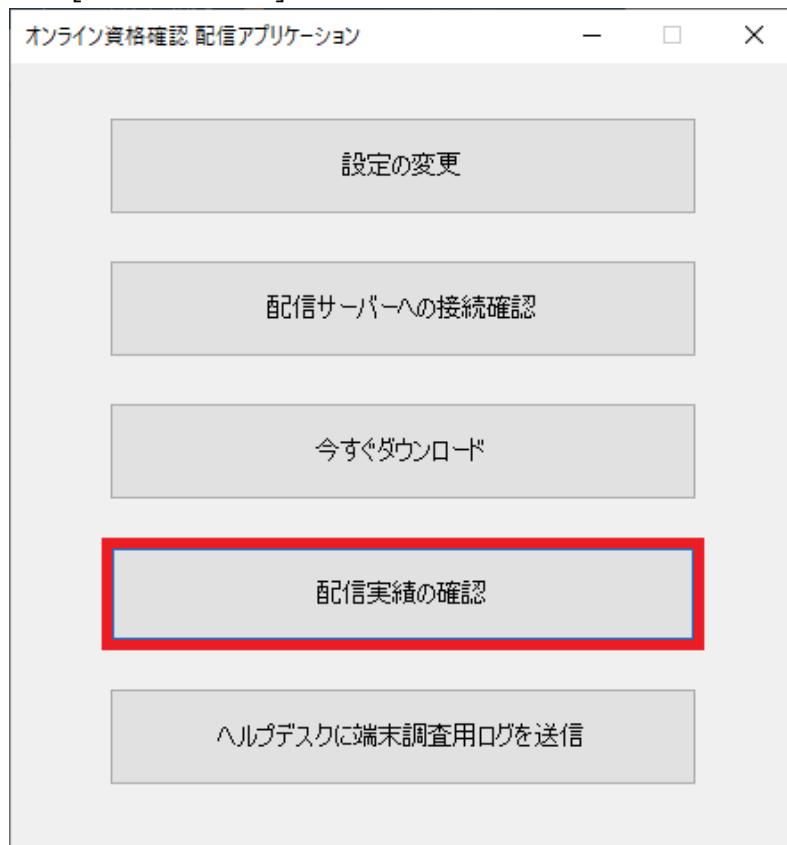

- ④ 表示された配信実績を確認し、バージョンが変更されていれば、アップデートが完了しています。
環境によって、配信実績の反映に時間を要する場合があります。その際は、1分ほど時間をおいてから、再度、配信実績の確認を行ってください。
※顔認証ベンダー提供の顔認証付きカードリーダーアプリケーションにつきましては、各社のバージョンをご確認ください。

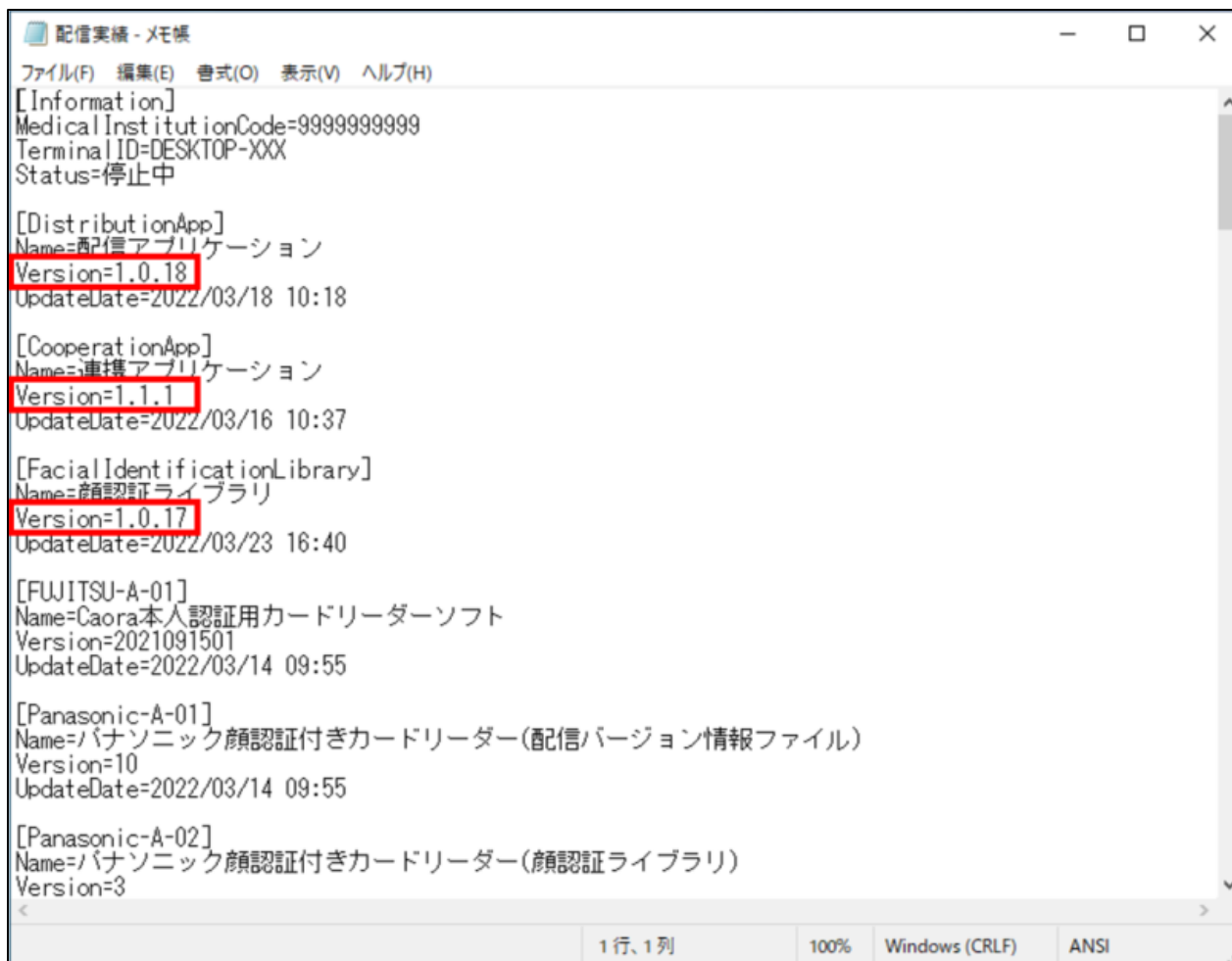

```
配信実績 - メモ帳
ファイル(F) 編集(E) 書式(O) 表示(V) ヘルプ(H)
[Information]
MedicalInstitutionCode=9999999999
TerminalID=DESKTOP-XXX
Status=停止中

[DistributionApp]
Name=再配信アプリケーション
Version=1.0.18
UpdateDate=2022/03/18 10:18

[CooperationApp]
Name=連携アプリケーション
Version=1.1.1
UpdateDate=2022/03/16 10:37

[FacialIdentificationLibrary]
Name=顔認証ライブラリ
Version=1.0.17
UpdateDate=2022/03/23 16:40

[FUJITSU-A-01]
Name=Caora本人認証用カードリーダーソフト
Version=2021091501
UpdateDate=2022/03/14 09:55

[Panasonic-A-01]
Name=パナソニック顔認証付きカードリーダー(配信バージョン情報ファイル)
Version=10
UpdateDate=2022/03/14 09:55

[Panasonic-A-02]
Name=パナソニック顔認証付きカードリーダー(顔認証ライブラリ)
Version=3
< >
1行, 1列 100% Windows (CRLF) ANSI
```

確認後、×ボタンでメモ帳を閉じます。

3. 動作確認

レセコン・顔認証装置等から資格確認ができることを確認して下さい。

レセコン・顔認証装置等での操作は、それぞれのシステムにより異なります。レセコン・顔認証装置等のマニュアルをご参照下さい。

4. 初期セットアップにおいて、手動更新したが問題が発生した場合

環境設定等に問題が無いかご確認ください。

[参考資料]

- 動作確認チェックリスト
- 医療機関等向けセットアップ手順書_別紙トラブルシューティング
 - 補 16 連携アプリケーションが動作しない
 - 補 17 配信アプリケーションが動作しない
 - 補 18 顔認証付きカードリーダーアプリケーションが動作しない

以上